


Digivit PIP

Orpedo

Orthopedics Company KG
Lietzenburger Str. 75
D-10719 Berlin

Telefon: +49 (30) 88 71 202-00
Telefax: +49 (30) 88 71 202-11

Web: www.orpedo.com
Mail : info@orpedo.com

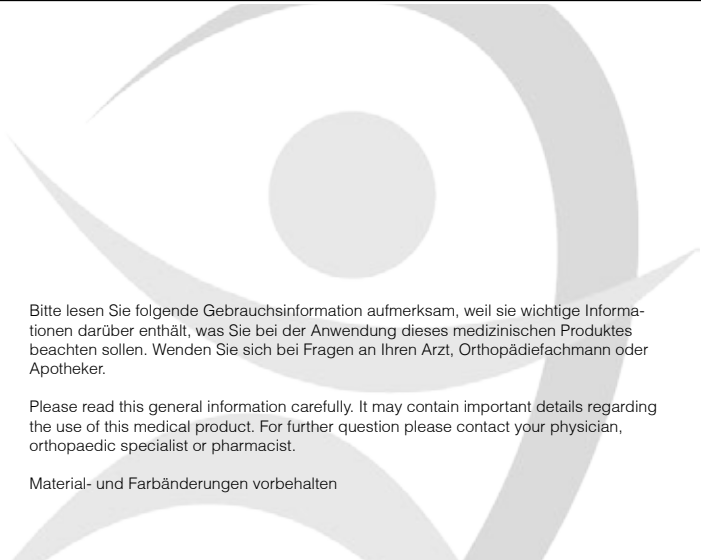

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses medizinischen Produktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker.

Please read this general information carefully. It may contain important details regarding the use of this medical product. For further question please contact your physician, orthopaedic specialist or pharmacist.

Material- und Farbänderungen vorbehalten

GEBRAUCHSINFORMATIONEN

Stand: 04/2015

Produktbeschreibung:

Die Fingerschiene Digivit PIP dient der Extension des Fingermittelgelenks(PIP).

Die Schiene wird aus Plastik hergestellt und fügt sich durch ihre Formgebung und dem 3-Punkt-Prinzip optimal an den zu versorgenden Finger an. Die Fingerschiene ist einem Farbton nachempfunden der der Haut ähnelt und damit einen unauffälligen Tragekomfort gewährleistet.

Indikation:

- Flexion des Fingermittelgelenks

Kontraindikation

- Hautverletzungen
- Offene Wunden
- Schwellungen
- Allergien
- Nervenirritationen

Gebrauchsanweisung

Den zu versorgenden Finger auf die zwei gewölbten Fixierungselemente betten, bis die Flexion des Fingermittelgelenks durch das obere Fixierungselement gewährleistet ist

Hinweis

Bei schweren Verletzungen, Wunden, Schwellungen, Allergien, anhaltenden Schmerzen und anderen Erkrankungen bzw. Komplikationen ist unbedingt der Arzt oder Apotheker zu konsultieren. Um den korrekten Sitz der Digivit PIP zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen und Einstellen durch den Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker erfolgen.

Material

Thermoplastisch

Pflegeanleitung (☞☒☒☒☒)

Das Hilfsmittel vorsichtig in milder Seifenlauge reinigen. Erhitzen durch direkte Sonnenstrahlen, Heizkörper, Bügeleise, o. ä. vermeiden. Nicht bleichen, nicht chemisch reinigen.

Farbe

haut

INSTRUCTION FOR USE

Status: 04/2015

Produktbeschreibung:

The finger splint Digivit PIP offers a Extension of the middle knuckle joint (PIP). The splint is manufactured with plastic and attaches ideal to the finger because of the three-point-principle. The color of the finger splint resembles the skin color which leads to unobtrusive wearing comfort.

Indications:

- inflection of the middle finger hinge

Contraindication

- dermal injury
- open wounds
- swellings
- allergies
- nerv irritation

Instructions

Bed the injured finger on the two curved fixation objects until the flexion of the middle knuckle joint is guaranteed.

Notice

Please contact your physician or pharmacist in any of the following cases: severe injuries, open wounds, swellings, allergies and other diseases or complication. The first application and adjustment should be done by your physician, orthopaedic specialist or pharmacist to ensure the correct fitting of the Digivit PIP.

Material

Thermoplastic

Washing instruction (☞☒☒☒☒)

The support may be hand washed in mild detergent. Avoid direct sunlight, heat of radiators, electric iron or the like. Do not bleach.

Color

skin