


Thorax-Abdominivit 680 mit Aloe Vera

Orpedo

Orthopedics Company KG
Lietzenburger Str. 75
D-10719 Berlin

Telefon: +49 (30) 88 71 202-00
Telefax: +49 (30) 88 71 202-11

Web: www.orpedo.com
Mail : info@orpedo.com

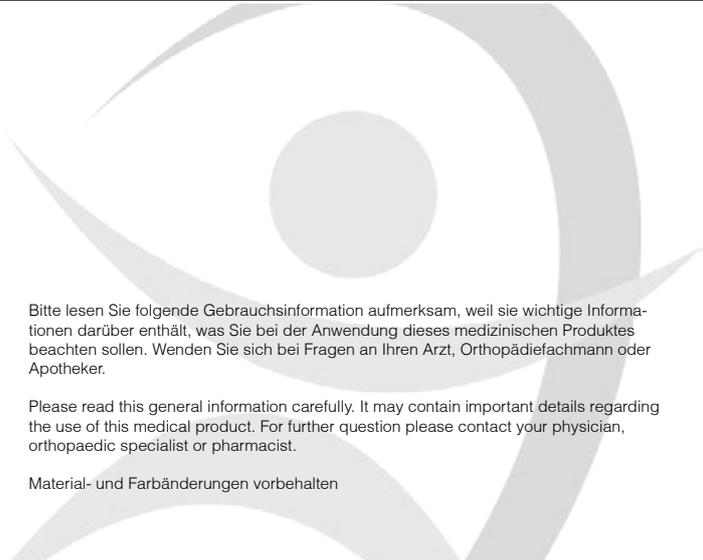

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses medizinischen Produktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker.

Please read this general information carefully. It may contain important details regarding the use of this medical product. For further question please contact your physician, orthopaedic specialist or pharmacist.

Material- und Farbänderungen vorbehalten

GEBRAUCHSINFORMATIONEN

Stand: 04/2015

Produktbeschreibung

Die Thorax-Abdominivit 680 ist eine Leibbandage mit integrierten Aloe Vera Mikroapseln und Silberionen. Die Bandage ermöglicht eine optimale Stützung des Rückens und der Bauchdecke und erleichtert den Heilungsprozess von postoperativen Wunden. Die Klettverschlüsse sorgen für eine leichte Handhabung und einen perfekten Sitz des Hilfsmittels. Ihre längselastische Beschaffenheit ermöglicht eine optimale Anpassung der Kompression. Eine gleichmäßige Druckverteilung ist gewährleistet. Die therapeutische Wirkung wird mit der integrierten Aloe Vera und den Silberionen zusätzlich unterstützt. Durch ihre antiseptischen Eigenschaften eignen sich Aloe Vera und Silber hervorragend zur Wunddesinfektion und beschleunigt obendrein die Zellerneuerung und dadurch den Heilungsprozess. Die leichte Duftnote der Aloe Vera bewirkt ein angenehmeres Tragegefühl.

Indikationen

- Narbenschutz
- Nabelbrüche
- Hängeleib
- nach Bauch OP
- zur postoperativen Stützung
- Rippenfrakturen
- Leistenbrüche

Kontraindikation / Anwendungsrisiken

Bisher nicht bekannt.

Gebrauchsanweisung

Die Thorax-Abdominivit 680 mit Aloe Vera wird um die Taille angelegt. Das Produkt ist den Angaben und dem Zweck entsprechend anzuwenden.

Materialzusammensetzung

Polyamid: 63%
Elasthan: 15%
Baumwolle: 12 %
Polyester: 10%
Silberionen
Aloe Vera Mikroapseln

Hinweise

Bei schweren Verletzungen, offenen Wunden, Schwellungen, Allergien und anderen Erkrankungen bzw. Komplikationen ist unbedingt der Arzt oder Apotheker zu konsultieren. Um den korrekten Sitz des Hilfsmittels zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen durch Ihren Arzt oder Orthopädiefachmann erfolgen.

Sollten Kälte- bzw. Taubheitsgefühl entstehen, ist die Bandage sofort zu lockern oder abzulegen und Sitz und Größe durch Arzt oder Fachgeschäft zu überprüfen. Bei längeren Ruhephasen und während des Schlafens soll auf die Bandage verzichtet werden. Bitte halten sie Rücksprache mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Orthopädiefachkraft.

Pflegeanleitung (☹️🚫🧼🧴)

Die Bandage vorsichtig mit der Hand bei 30° C in milder Seifenlauge reinigen. Keine Weichspüler verwenden, da diese die Kompressionseigenschaften beeinflussen. Erhitzen durch direkte Sonnenstrahlen, Heizkörper, Bügeleisen, o.ä. vermeiden. Nicht bleichen, nicht chemisch reinigen.

INSTRUCTION FOR USE

Status: 04/2015

Description

The Thorax-Abdominivit 680 is a body bandage with integrated aloe vera microcapsules and silver ions. The bandage enables an optimal support of the back and the abdominal wall, and helps the healing process of post-operative wounds. The Velcro fasteners provide ease of use and a perfect positioning of the product. Its elastic characteristics in the length direction enable the compression to be optimally adapted. Even pressure distribution is ensured. The therapeutic effect is also supported by the integrated aloe vera and the silver ions. Aloe vera and silver are, due to their antiseptic properties, ideal for wound disinfection, and also accelerate cell renewal and the healing process. The slight scent of aloe vera produces a pleasant feeling when the product is being worn.

Indications

- Scar protection
- Umbilical hernias
- Abdominal wall conditions
- After abdominal surgery
- For post-operative support
- Rib fractures
- Hernias

Contraindication

Unknown.

Use instructions

The Thoracic Abdominivit 680 with aloe vera is positioned around the waist. The product is to be used according to the instructions and purposes.

Material composition

Polyamide: 63%
Spandex: 15%
Cotton: 12 %
Polyester: 10%
Silverion
Aloe Vera Micropackages

Notice

Please contact your physician or pharmacist in any of the following cases: severe injuries, open wounds, swelling, allergies and other diseases or complication. The first application an adjustment should be done by your physician, orthopaedic specialist or pharmacist to ensure the correct fitting of the thoracic abdominivit 680 with aloe vera. In case if numbness or coldness loosen the support or take it off at once. This product has its full effect on the movement. For this reason the bandage has to be taken off in case of long respites or while sleeping. Ask your physician or orthopaedic specialist or pharmacist to check the fit and adjustment.

Washing instruction (☹️🚫🧼🧴)

The support may be handwashed in mild detergent at a temperature of 30° C (86° F). Do not use fabric softener because this affect the compression quality. Avoid direct sunlight, heat of radiators, electric iron or the like. Do not bleach or dry.